



iE 12A

ECG digital de 12 canales

iE 12A


ECG digital de 12 canales



Características:


- Pantalla de LCD de 8.9 pulgadas en alta resolución, mostrando 12+1 formas de onda;
- Teclado alfanumérico con teclas de silicona de luz de fondo, a prueba de agua;
- El fondo de línea de cuadrícula con proporción 1:1 satisface el hábito de revisar de los médicos;
- Análisis de intervalo R-R, informes de análisis breve y detallado;
- Análisis específicos para adultos y pediátricos;
- Mostración, congelación y observación de informes de formas de onda en tiempo real;
- Varios modos de grabación satisface diferentes requisitos;
- Datos de ECG se pueden guardar en formato de JPG o XML;
- Aplicación del Código Minnesota, base de datos CSE & AHA;
- Grabación automática al detectar arritmia;
- Puertos múltiples para transmisión de datos (LAN, USB, SD card, VGA);
- Apoya sistema de gestión de ECG, protocolo HL7, DICOM y WIFI integrado (opcional);
- Con software en español y manual de usuario en español.

- **Caja única de adquisición de datos de ECG con teclas independientes de función**

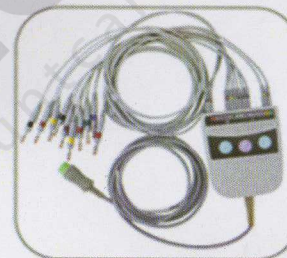


- **Varias opciones de entrada**

Apoya entrada por pantalla táctil, teclado y escáner de código de barras

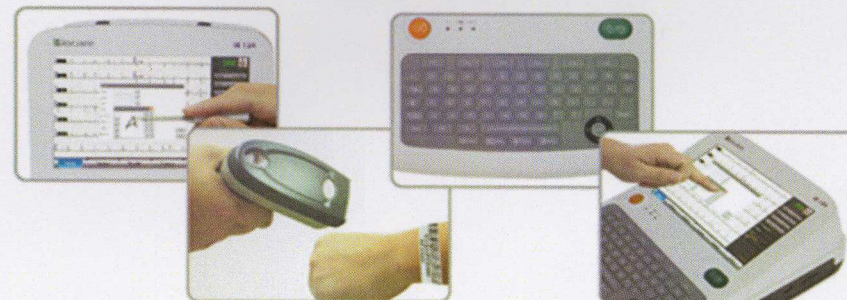

Modo de monitoreo de arritmia

La función de grabación automática se activará al detectar la arritmia

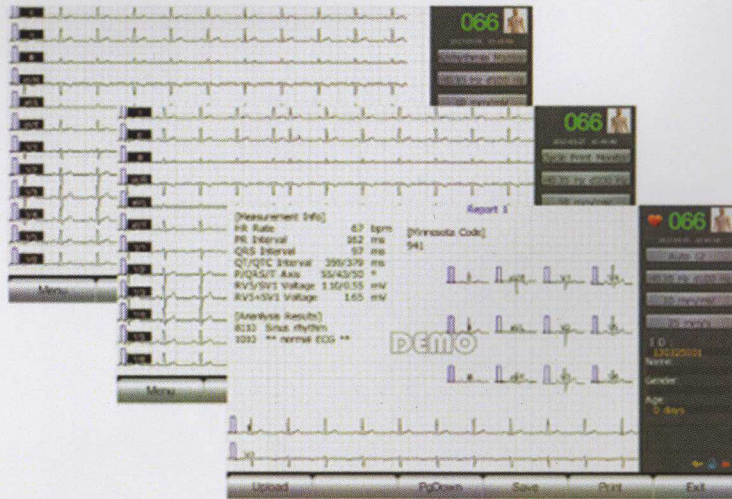


Congelación de formas de onda y función de revisión

La función de la congelación de formas de onda en tiempo real apoya la revisión de 300 segundos de formas de onda en plena revelación



Medición precisa y función de análisis

Repuesta de frecuencia desde 0.05 hasta 250 Hz, especial para diagnósticos pediátricos. Apoya análisis de intervalo R-R, detección de arritmia, Cabrera, informes de análisis breve y detallado

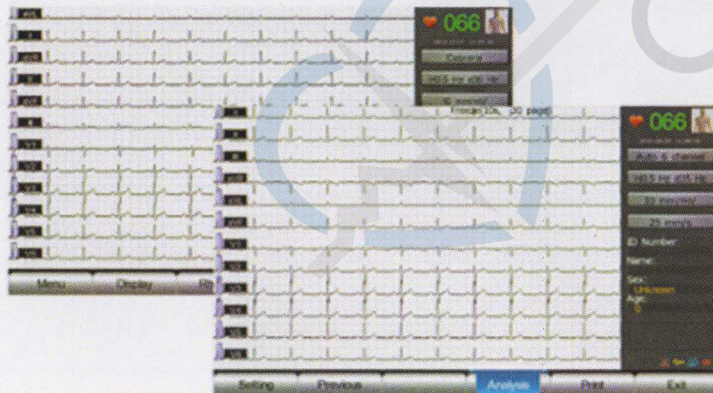


Apoya memoria de datos

Memoria interna de 200 exámenes
SD card para almacenamiento ilimitado
USB externo para fácil transmisión de datos





iE 12A

ECG digital de 12 canales

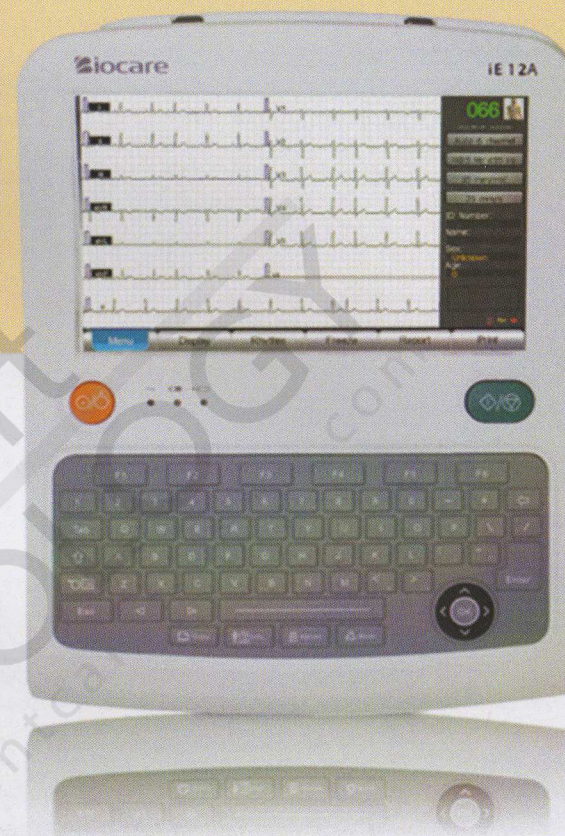


Especificaciones:

Derivación	Adquisición simultánea de 12 derivaciones estándares.
Impedancia de entrada	> 50 MΩ
Repuesta a frecuencia	0.05 ~ 250Hz
Corriente de fuga del paciente	< 10μA
Corriente del circuito de entrada	≤ 0.1μA
Constante de tiempo	≥ 3.2s
Sensibilidad	2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 mm/mV, Ganancia automática
Velocidad de papel	5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50mm/s
Modo de operación	automático, manual, ritmo, Cabrera y modo de ahorro de papel
Suministro de alimentación	AC: 100 ~ 240V, 50/60Hz, 110VA DC: 20V batería recargable
Papel de registro	210mm×150mm×200P Z-fold paper(A4 size)
Nivel de seguridad	IEC Class 11, Type CF
Dimensión	345mm×260mm×129mm(L×W×H)
Peso neto	5.2kg

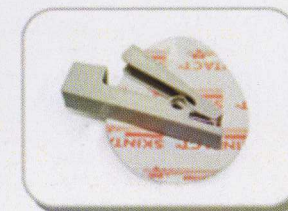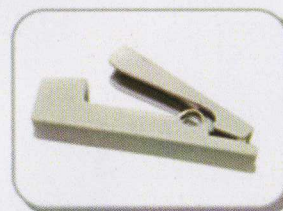

Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd.

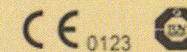

Add: 7/F, Block A, Shenzhen Mingyou Industrial Products Exhibition & Procurement Center, Baoyuan Road, Xixiang Sub-district, Bao'an District, 518102 Shenzhen, P.R. China
Tel: +86 755 27960888 Fax: +86 755 27960643 E-mail: sales@biocare.com.cn

<http://www.biocare.com.cn>